



Modell Spezifikation

Talos™ thorakaler Stentgraft

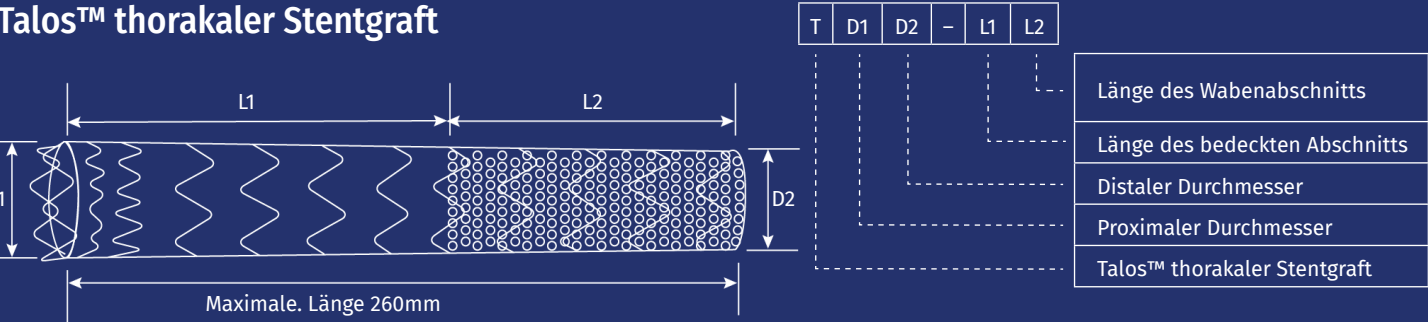

Größenbeschreibung	Größenbereich (mm)
Proximaler Durchmesser (D1)	26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Distaler Durchmesser (D2)	20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Länge des bedeckten Abschnitts (L1)	100 / 160 / 200
Länge des Wabenabschnitts (L2)	0 / 60 / 100
Optionen für die Taperung	0 / 4 / 6

Talos™ Wabenverlängerung

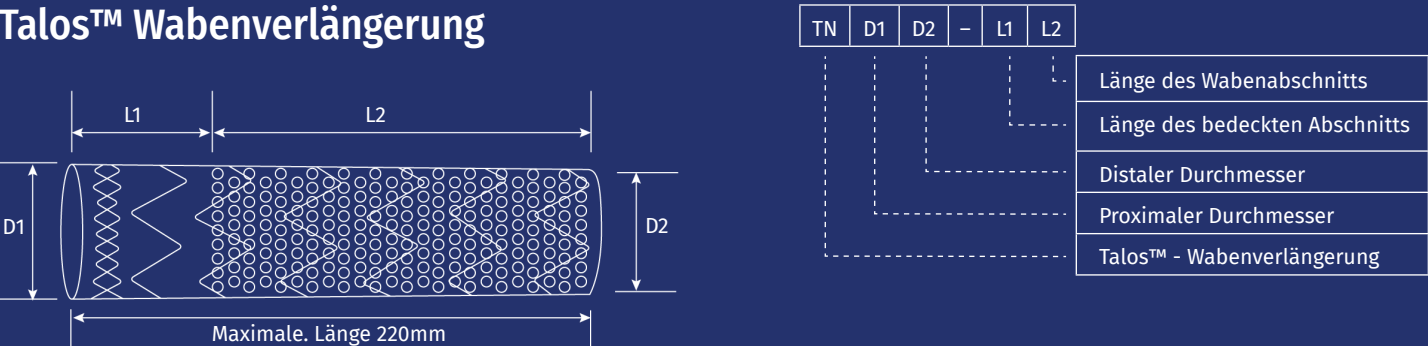


Größenbeschreibung	Größenbereich (mm)
Proximaler Durchmesser (D1)	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 40
Distaler Durchmesser (D2)	22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Länge des bedeckten Abschnitts (L1)	20
Länge des Wabenabschnitts (L2)	100 / 140 / 180
Optionen für die Taperung	0 / 4 / 6

Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um die Machbarkeit des gewünschten Designs zu prüfen.

TalosTM


Thorakales Stentgraft System

Der spezifische Dissektionsstentgraft

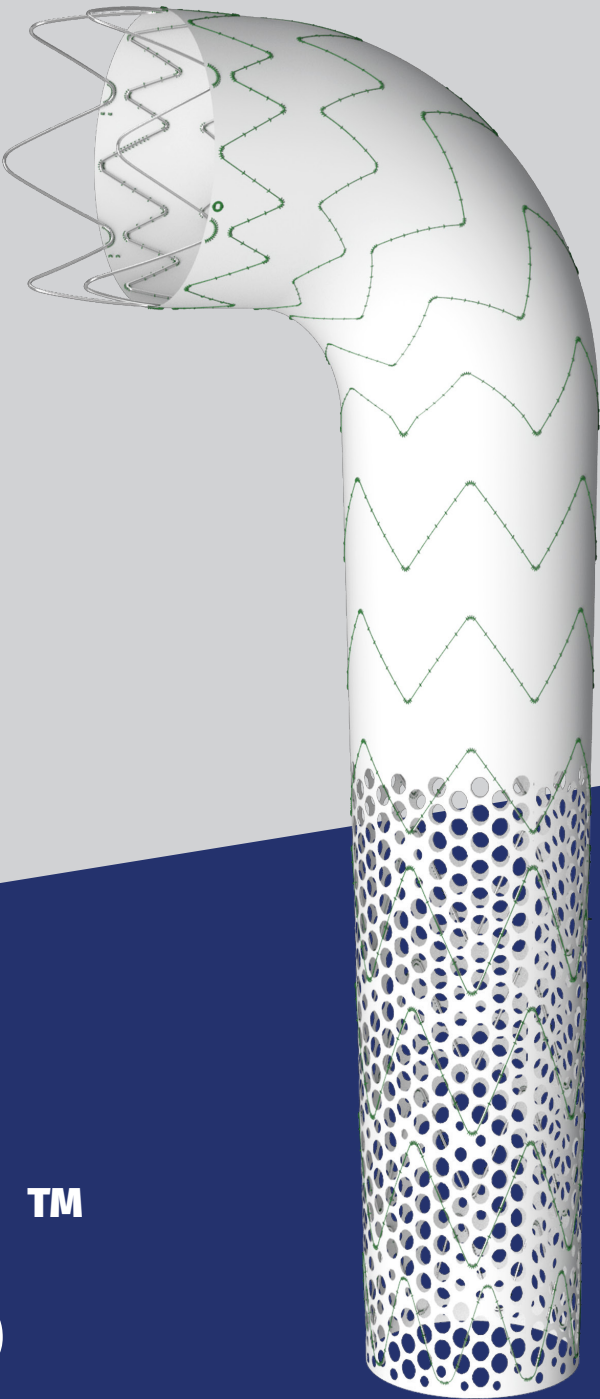


Ein neues versorgungsparadigt


Proximale abgerundete Barestents
Reduziert die Belastung der Stentspitzen

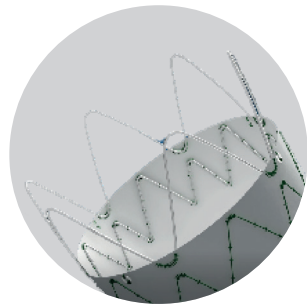

Duale Minifedern
Verbesserte Anpassungsfähigkeit

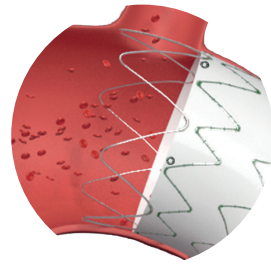

Distales Wabenmuster-Design

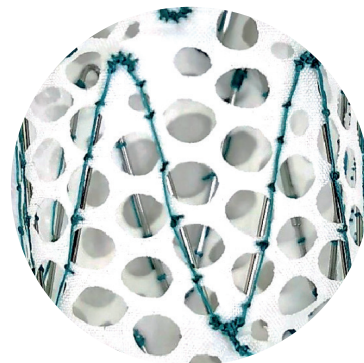

Vermeidet das Risiko einer Querschnittslähmung durch Erhaltung der Versorgung über die Interkostalarterie während der Remodellierung des distalen wahren Lumens.


0%

Paraplegie nach 12 Monaten*

*Aus der prämarkteinführenden klinischen Studie Talos. Daten liegen MicroPort Endovastec vor.

Auslieferungssystem und Bereitstellungsschritte

Tip Capture Mechanismus

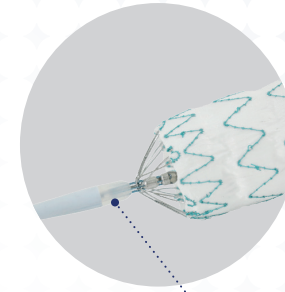

Flaches Einführungssystem
20F und 22F

Verbundwerkstoff der Hülle
Hohe Flexibilität

Ziehen Sie die Außenhülle zurück.
Schieben Sie die Rotationsarretierung nach oben und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn.

Setzen Sie das Stentgraft frei.
Drehen Sie den Drehgriff im Uhrzeigersinn bis zur Markierung 1 und ziehen Sie am gelben Ring.

Tip Capture Mechanismus
Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn auf Markierung 2 und ziehen Sie am grünen Ring.

